Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

15.10.2026 № 02И-1229/26

На № _____ от _____

О недоброкачественном
медицинском изделии

2644962

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Донецкой Народной Республике недоброкачественного медицинского изделия:

«Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями, X-ray Computed Tomography System Model: Anatom 64 Clarity», серия: 06730110118, дата производства: 11.2022; использовать до: срок службы 10 лет, производства "Шэньчжэнь Анке Хай-тек Ко. Лтд.", Китай, регистрационное удостоверение от 22.08.2023 № РЗН 2021/13280 (далее - Медицинское изделие), и представляющего угрозу здоровью при его применении (см. приложение).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации недоброкачественного Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия, а также фотографические изображения на 16 л. в 1 экз.

Врио руководителя  В.Д. Пархоменко

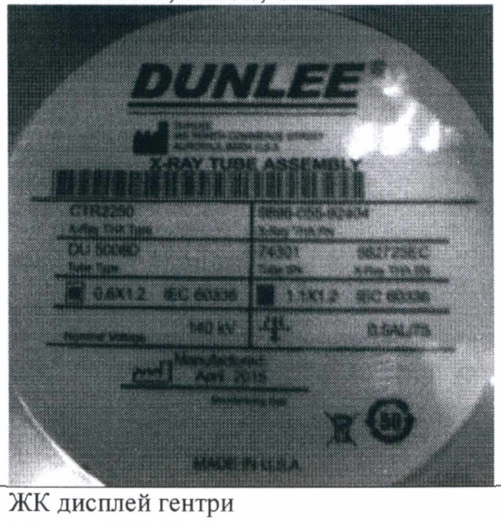
Приложение к письму Росздравнадзора
от 15.10.2026 № 02И-1129126.

Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия

<table>
<tr><th>Сравниваемые сведения/параметры</th><th>Комплект
регистрационной документации
(регистрационное удостоверение
от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)</th><th>Образцы выявленного медицинского изделия</th></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Выписка из технической документации томографа рентгеновского компьютерного Anatom 64 с принадлежностями модели: Clarity и Precision</u></td></tr>
<tr><td>Технические параметры</td><td>Корректировочные коэффициенты CTDIw, соответствующие различным значениям пикового напряжения представлены в таблице ниже; другие параметры остаются неизмененными
<table>
<tr><th>Боути фильтр / кВпик</th><th>Маленький</th><th>Большой</th></tr>
<tr><td>80</td><td>0,36</td><td>0,37</td></tr>
<tr><td>100</td><td>0,64</td><td>0,66</td></tr>
<tr><td>120</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td>140</td><td>1,39</td><td>1,39</td></tr>
</table>
Корректировочные коэффициенты CTDIw, соответствующие различным значениям ширины коллиматора представлены в таблице ниже; другие параметры остаются неизмененными.
<table>
<tr><th>Боути фильтр / Коллиматор</th><th>Маленький</th><th>Большой</th></tr>
<tr><td>20мм</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td>10мм</td><td>1,02</td><td>1,02</td></tr>
<tr><td>5мм</td><td>1,04</td><td>1,05</td></tr>
<tr><td>2,5мм</td><td>1,10</td><td>1,09</td></tr>
<tr><td>1,25мм</td><td>1,32</td><td>1,31</td></tr>
</table></td><td>Отклонение CTDIw при коллимации 1,25 мм превышает 20%.






<u>Согласно ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008:</u>
B.2 Доза
Все значения доз должны быть в пределах ±20% значений, установленных в сопроводительных документах. Рассчитанные значения $CTDI_{объемн}$ для головы и тела должны быть в пределах ±20% значений, отображенных на консоли оператора
(Результаты измерений представлены далее)</td></tr>
<tr><td>Технические параметры</td><td>
<table>
<tr><th>Положение</th><th>кВ</th><th>мА*с</th><th>Фокусное пятно</th><th>Коллиматор (мм)</th><th>Боути фильтр</th><th>Доза (мГр)</th><th>мГр/100мАс</th><th>CTDIвоз</th></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>S</td><td>5,439</td><td>5,439</td><td>27,2</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>80</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>S</td><td>2,158</td><td>2,158</td><td>10,8</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>100</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>S</td><td>3,623</td><td>3,623</td><td>18,1</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>140</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>S</td><td>7,255</td><td>7,255</td><td>36,3</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>10</td><td>S</td><td>3,02</td><td>3,02</td><td>30,2</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Положение</th><th>кВ</th><th>мА*с</th><th>Фокусное пятно</th><th>Коллиматор (мм)</th><th>Боути фильтр</th><th>Доза (мГр)</th><th>мГр/100мАс</th><th>CTDIвоз</th></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>5</td><td>S</td><td>1,579</td><td>1,579</td><td>31,6</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>2,5</td><td>S</td><td>1,135</td><td>1,135</td><td>45,4</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>1,25</td><td>S</td><td>0,9149</td><td>0,915</td><td>73,2</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>L</td><td>5,559</td><td>5,559</td><td>27,8</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>80</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>L</td><td>2,272</td><td>2,272</td><td>11,4</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>100</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>L</td><td>3,793</td><td>3,793</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>140</td><td>100</td><td>L</td><td>20</td><td>L</td><td>7,532</td><td>7,532</td><td>37,7</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>10</td><td>L</td><td>3,147</td><td>3,147</td><td>31,5</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>5</td><td>L</td><td>1,642</td><td>1,642</td><td>32,8</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>2,5</td><td>L</td><td>1,179</td><td>1,179</td><td>47,2</td></tr>
<tr><td>Центр</td><td>120</td><td>100</td><td>L</td><td>1,25</td><td>L</td><td>0,947</td><td>0,947</td><td>75,8</td></tr>
</table>
Максимальное стандартное отклонение для всех доз составляет 20%.</td><td>Отклонение дозы на коллимациях 1,25 мм;
2,5 мм превышает 20%.</td></tr>
</table>



<table>
<tr><th>Сравниваемые сведения/параметры</th><th>Комплект
регистрационной документации
(регистрационное удостоверение
от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)</th><th>Образцы выявленного медицинского изделия</th></tr>
<tr><td>Технические параметры</td><td>Слой половинного ослабления пучка рентгеновского излучения был найден в условиях узкого пучка и измеренного напряжения на рентгеновской трубке
соответствующего 80 кВ, 100 кВ, 120 кВ и 140 кВ
Значения слоя половинного ослабления пучка рентгеновского излучения (слой/мм Al) представлены в следующей таблице:
<table>
<tr><th>Напряжение на трубке (кВ) / Фильтр Боути</th><th>80</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th></tr>
<tr><td>Маленький</td><td>4,96</td><td>6,29</td><td>7,25</td><td>8,36</td></tr>
<tr><td>Большой</td><td>4,8</td><td>5,94</td><td>6,9</td><td>7,7</td></tr>
</table></td><td>Измеренные значения не соответствуют требованию.
См. Далее</td></tr>
<tr><td>Маркировка</td><td>Контактное кольцо
Модель: E-Slip-Ring
Производитель: Schleifring und Apparatebau GmbH Am Hardtanger 10, 82256 Furstenfeldbruck, Германия



</td><td>Маркировка отсутствует</td></tr>
<tr><td>Маркировка</td><td>Рентгеновская трубка
Модель: CTR2250 для Anatom 64 Clarity
Производитель: DUNLEE, 555 North Commerce Street Aurora, Illinois, США

</td><td>Производитель (согласно маркировке):
DUNLEE, Philips Medical Systems DMC GmbH Röntgenstraβe 224, 22335 Hamburg/ Germany







</td></tr>
<tr><td>Маркировка</td><td>ЖК дисплей гентри
Модель: K6000+
Производитель: BeiJing DWIN Technology 18F, Building 5, Jia 2#, Xi San Huan Bei Rd, Haidian District, Beijing, Китай</td><td>Модель K600+

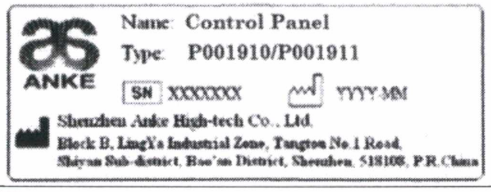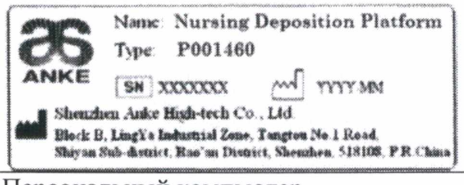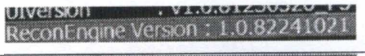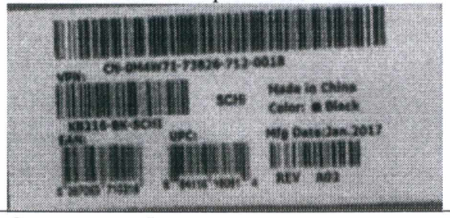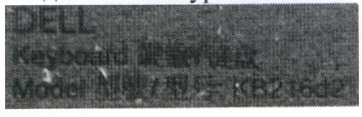
</td></tr>
<tr><td>Маркировка</td><td>Панель управления гентри
Модель P001910/ P001911
Производитель; Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road,</td><td>Маркировка отсутствует</td></tr>
</table>

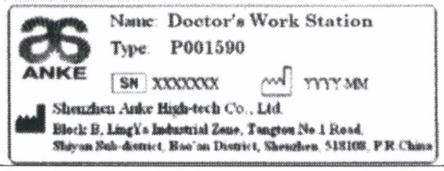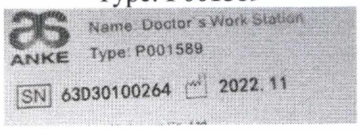Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
	Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China 	
Маркировка	Подставка Модель: P001460 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co.,Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China 	Маркировка отсутствует
Маркировка	Персональный компьютер Модель: Optiplex 7060 с торговой маркой Dell Производитель: Dell Inc. Сертификат соответствия №ТС RU CUS.ME06.B.03072 срок действия до 19.04.2023	Маркировка отсутствует
Маркировка	Предустановленное программное обеспечение: Anatom ClearVIEW V 1.1.4 от 17.07.2017	Anke Anatom ClearVIEW, Issued Version: **V1.0, Full Version: V1.0.230320**
Маркировка	Программное обеспечение ReconEngine версии 1.0.05 от 27.09.2015	
Маркировка	Программное обеспечение MySQL версии 5.6.10 от 06.04.2013	
Маркировка	Клавиатура Модель: **KB212** Производитель: Dell Inc 	Модель клавиатуры: **KB216d2** 
Маркировка	Стол для рабочей станции оператора Модель: R820 Габариты (ШхГхВ), см 140х65х73. Максимальная нагрузка, кг: 50. Материал: металл, ЛДСП. Производитель: Shenzhen South Zhuoyi Furniture Co.,Itd. (КНР)	Маркировка отсутствует
Маркировка	Кресло для оператора Модель: 6А20 Габариты, мм: ширина внутр. 47 см. ширина габаритная 55 см. высота сиденья от 46 до 60 см. высота спинки 74 см. Максимальная нагрузка: 120 кг Производитель; Shenzhen South Zhuoyi Furniture Co.,ltd. (КНР)	Маркировка отсутствует

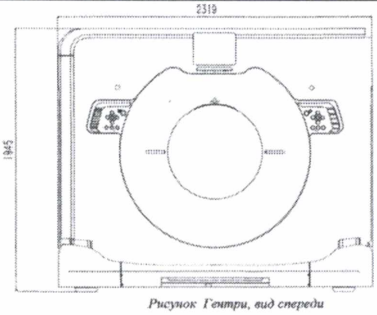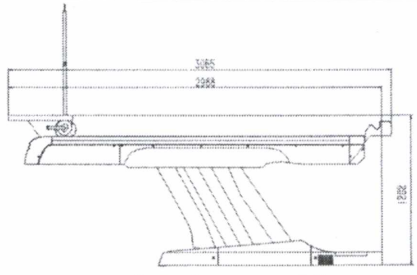Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
Маркировка	Рабочая станция врача для обработки цифровых изображений в сборе 	Type: **P001589** 
Маркировка	Персональный компьютер Модель: Optiplex 7060 с торговой маркой Dell Производитель: Dell Inc. Сертификат соответствия №ТС RU C-US.ME06.B.03072 срок действия до 19.04.2023	Маркировка отсутствует
Маркировка	Предустановленное программное обеспечение: Anatom ClearVIEW V1.1.4 от 17.07.2017	Anke Anatom ClearVIEW, Issued Version: **V1.0, Full Version: V1.0.230320**
Маркировка	Фантом калибровочный с фиксатором Модель: P012017 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China Модель: S012021 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China	Маркировка отсутствует
Маркировка	Фиксирующие ремни Модель: P001627 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China	Маркировка отсутствует
Маркировка	Принадлежность для поддержки головы Модель: P001628 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China	Маркировка отсутствует
Маркировка	Регулируемая опора головы Модель: P001626 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China	Маркировка отсутствует
Маркировка	Подкладка для головы Модель: P001624 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China	Маркировка отсутствует
Маркировка	Матрас для стола снимков Модель: P002627 Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P. R. China	Маркировка отсутствует
Маркировка	Принадлежность для ног Модель: P002097	Маркировка отсутствует

Сравниваемые сведения/параметры	**Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)**	**Образцы выявленного медицинского изделия**
	Производитель: Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyan Sub-district Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China	
Габариты и вес основных компонентов оборудования	Рама гентри: 2319x1140x1945	2319 x 1140 x 1980 мм
	Блок управления вращения гентри: 255x70x188,5	**230x64x198 мм**
	Блок управления наклона гентри: 530x180x100	**150 x 140 x 42 мм**
	Блок детекторов: 1350x536x296	1350 x **320** x 296 мм
	Стол снимков: 2988x786x1202	2988 x **650 x 1160** мм
	Блок управления горизонтального движения стола: 130x150	**100 x 154** мм
	Блок управления вертикального движения стола:150x130	**85** x 130 мм
	Питающее устройство: 900x700x1450	**800 x 631 x 1365 мм**
	 *Рисунок Гентри, вид спереди* Размер A: 2319 мм Размер B: 1945 мм	Размер A: 2319 мм **Размер B: 1980 мм**
	 *Рисунок Стол снимков вид сбоку*  *Рисунок Стол снимков вид сверху* Размер A: 3065 мм Размер B: 2988 мм Размер C: 786 мм Размер D: 1202 мм	**Размер A: 3075 мм** Размер B: 2988 мм **Размер C: 650 мм** **Размер D: 1160 мм**
Технические параметры	Пиковая мощность: 115kVA	**33,3 кВА** Измерения выполнялись при уставке анодного тока 330 мА.
Технические параметры	Переменный ток: 175A	**89 А** Измерения выполнялись при уставке анодного тока 330 мА. См. Пункт 8.14 настоящего Протокола
Технические параметры	Расстояние от фокуса до детекторов: >988 мм	**965 мм**

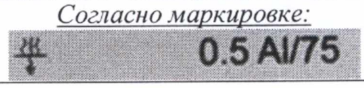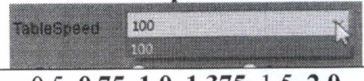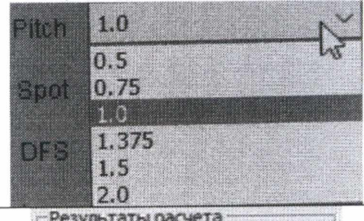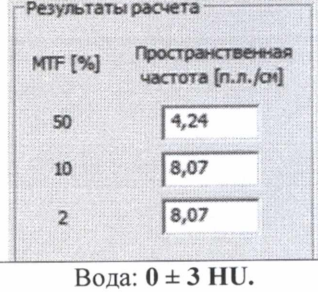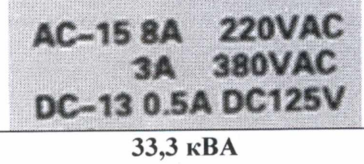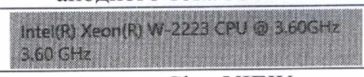
Сравниваемые сведения/параметры	**Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)**	**Образцы выявленного медицинского изделия**
Технические параметры	Минимальная собственная фильтрация (эквивалент аллюминия): 0 мм Al	*Согласно маркировке:* 
Маркировка	Лазерное устройство позиционирования	**Маркировка отсутствует**
Технические параметры	Диапазон настроек тока, шаг настроек для Anatom 64 Clarity: 10-420 мА	Невозможно выполнить экспозиции на токе выше 330 мА.
Технические параметры	с шагом 10 мА для Anatom 64 Clarity	**Шаг 1 мА**
Технические параметры	Выходная мощность: > 115 кВА	**33,3 кВА** Измерения выполнялись при уставке анодного тока 330 мА.
Маркировка	Фильтрация (эквивалент алюминия): 1.5 мм Al	На маркировке коллиматора отсутствуют сведения о фильтрации.
Технические параметры	Скорость скаут сканирования: 150 мм/с	**TableSpeed: 100** 
Технические параметры	Питч (шаг): 0,5; 1,5	0.5, **0.75, 1.0, 1.375**, 1.5, **2.0** 
Технические параметры	Разрешение детектора MTF0: 21 пар-линий/см MTF10: 15 пар-линий/см MTF50: 12 пар-линий/см	
Технические параметры		Вода: **0 ± 3 HU.**
Технические параметры	Вода: -1000 HU ± 10 HU Точность чисел КТ: Воздух: 0±3HU Вода: -1000HU±10HU	*Согласно Приложению В, пункт В.3 ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008:* Примечание - Для фантома, наполненного водой, установленное значение должно быть равно нулю.
Технические параметры	Диапазон вертикального перемещения: 430~930 мм	**492-1070 мм**
Технические параметры	Номинальное напряжение: 250В АС	*Согласно маркировке блока педального:* 
Технические параметры	Номинальная мощность: 115кВА	**33,3 кВА** Измерения выполнялись при уставке анодного тока 330 мА.
Технические параметры	Частота процессора (CPU): 3,7 ГГц или больше	
ПО	Программное обеспечение Anatom Clear VIEW версии V 1.1.3 от 05.05.2017	Anatom ClearVIEW, **Issued Version: V1.0,** **Full Version: V1.0.230320**

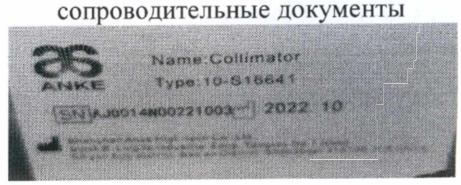Сравниваемые сведения/параметры	**Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/13280 срок действия не ограничен)**	**Образцы выявленного медицинского изделия**
Технические параметры	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.3.: - Неподвижные слои материала, расположенные на пути рентгеновского пучка, направленного на пациента, отличные от дополнительных фильтров и неснимаемых материалов в рентгеновском излучателе, должны быть отмечены значением эквивалента качества фильтрации, выраженном в толщине слоя алюминия вместе с качеством излучения, используемого для определения данного значения. Маркировка может быть сделана в форме ссылки на данные заявленные сведения в сопроводительных документах. Такие слои не нуждаются в маркировке, если они совокупно добавляют не больше эквивалента качества фильтрации 0,2-миллиметрового и не предназначены для учета при расчете полной фильтрации, требуемой для соответствия с 4-ым параграфом 7.1 дополнительного стандарта.	Согласно Выписке из технической документации, фильтрация (эквивалент алюминия) коллиматора 1,5 мм Al. На маркировке коллиматора отсутствует информация о фильтрации, ссылка на сопроводительные документы 

Фотоизображение недоброкачественного медицинского изделия




Основная маркировка изделия

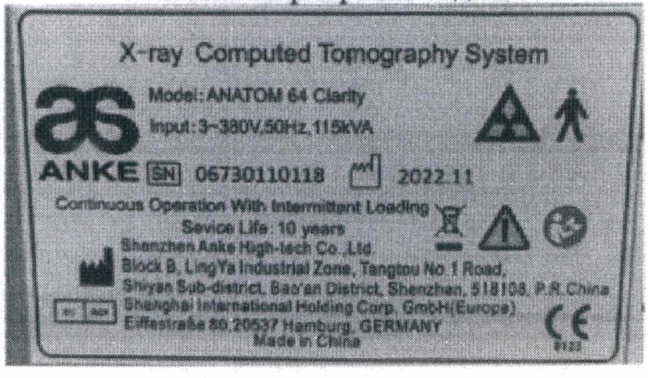


Гентри в сборе




Маркировка гентри

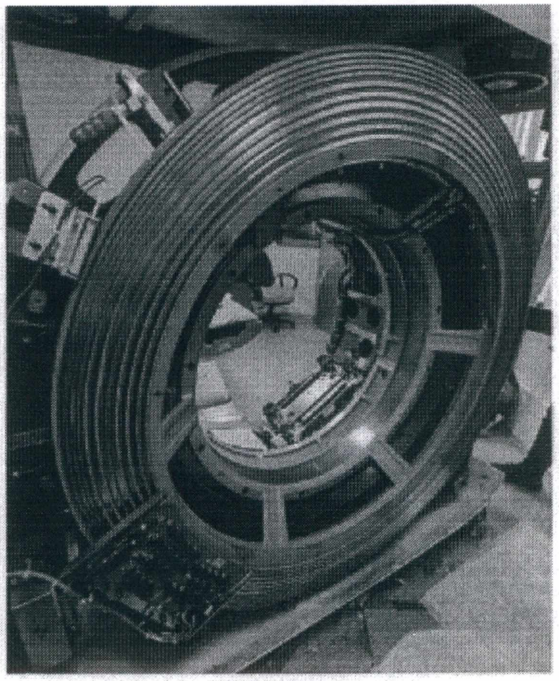


Рентгеновский излучатель

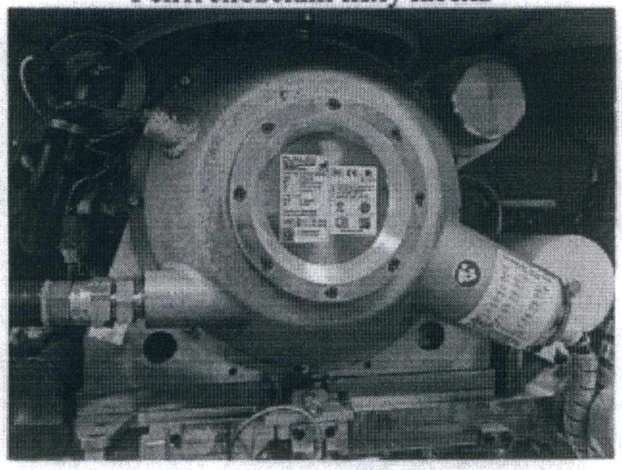

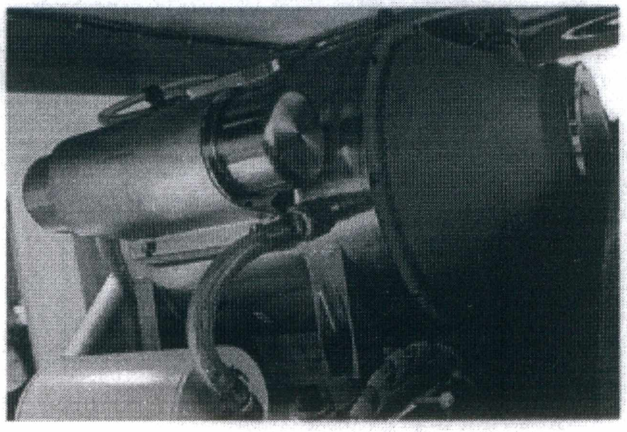


DUNLEE
Philips Medical Systems DMC GmbH
Röntgenstraße 24
22335 Hamburg / GERMANY
2022 -04
X-RAY TUBE HOUSING ASSEMBLY
Model CTR2250
REF 4598-013-25421
SN 21673S183766
0.5 Al/75
X-RAY TUBE
Model DU 5008D
SN 183766
Nominal X-ray Tube Voltage
140 kV IEC 60613:2010
UDI
0.6x1.2 IEC 60336
1.1x1.2 IEC 60336
(01)00884838092372
(21)21673S183766
MD
0123
MC 223209
US only
THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DHHS REQUIREMENT OF 21 CFR SUB-CHAPTER J
MANUFACTURED: April 2022
50
www.dunlee.com/ifu
X-Ray Tube Housing Assembly
CTR2250
X-Ray Tube
DU 5008D
Model Number
4598-013-25421
Serial Number
21673S183766
Nominal Voltage
140 kV
Date of Manufacture
April 2022
SPOT
FOCAL

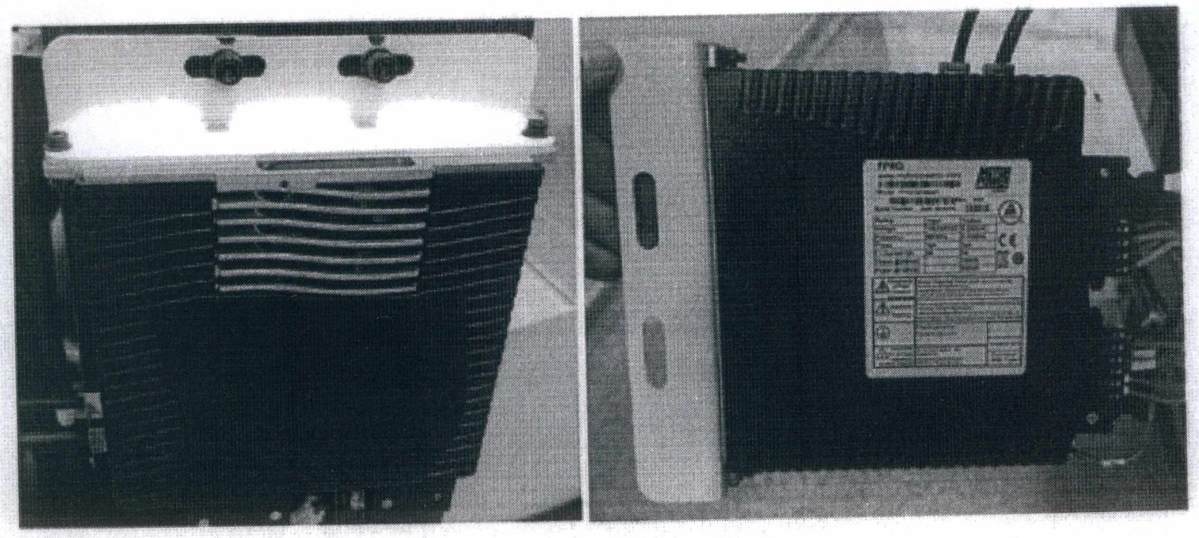

Маркировка блока управления наклона гентри

FPRO

www.motorpowerco.com

MOTOR POWER COMPANY


Model: FPRO-0032AAF1


Rev: V02

Serial Number: 222F-S010274

Rating	Input	Output
Voltage	120/240VAC	0-240VAC
Frequency	50/60Hz	0-1000Hz
Phase	1ph	3ph
F.L.Current 1ph	5A	3A
Power @240VAC		740VA
Power @120VAC		440VA

Dangerous voltage Tension dangereuse	Residual voltage. Risk of electric shock. Wait 5 minutes after removing power before servicing Voltage résiduel. Risque de décharge électrique. Attendez 5 minutes après mise hors tension avant de manipuler	
CAUTION Attention	Read manual carefully and follow the safety instructions before use Use correct PE earthing technique Lisez le manuel attentivement et suivez les consignes de sécurité avant utilisation. Utilisez les techniques de mise en terre adéquates	
	Protective earth terminal Terminal de mise en terre	Ambient: 45°C
CAUTION, hot surface Attention, surface chaude	Do not touch heatsink. May cause burns Ne touchez pas le dissipateur thermique. Risque de brûlure	Enclosure IP20, Type-1

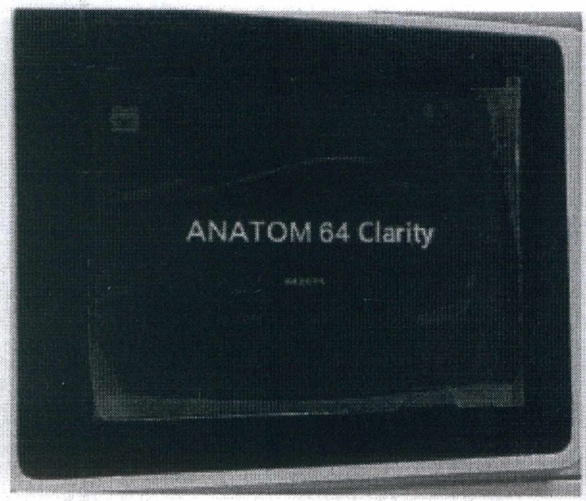


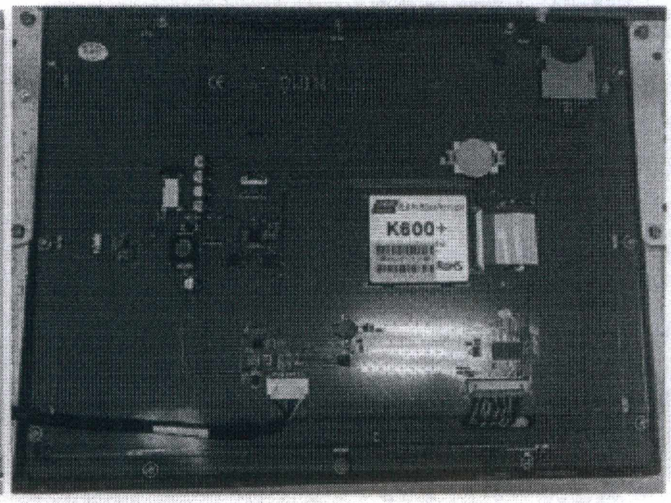


Маркировка ЖК дисплея гентри




Панель управления гентри

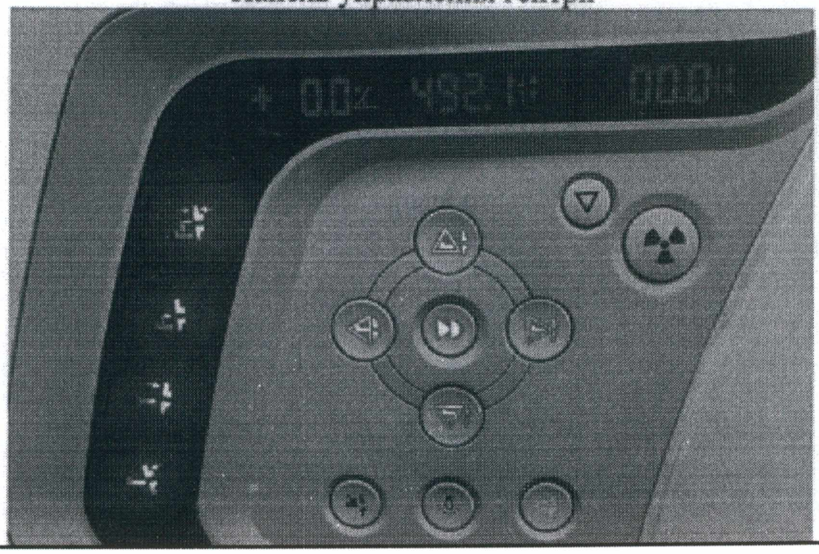


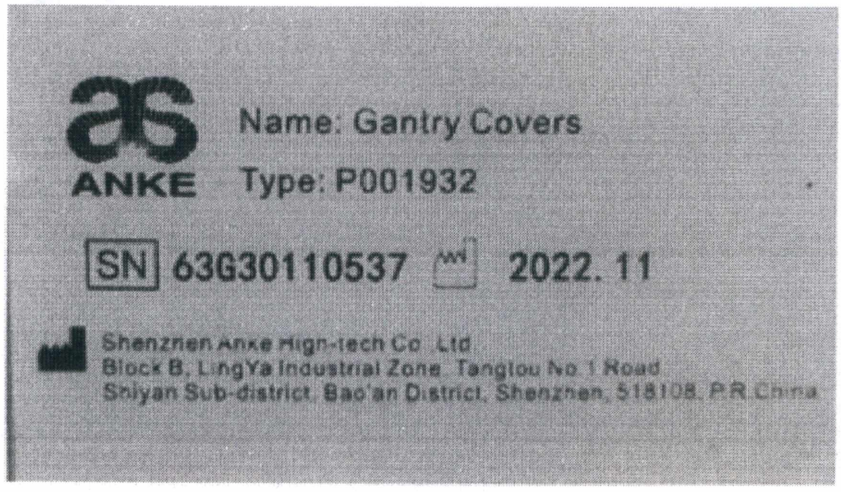


Стол снимков

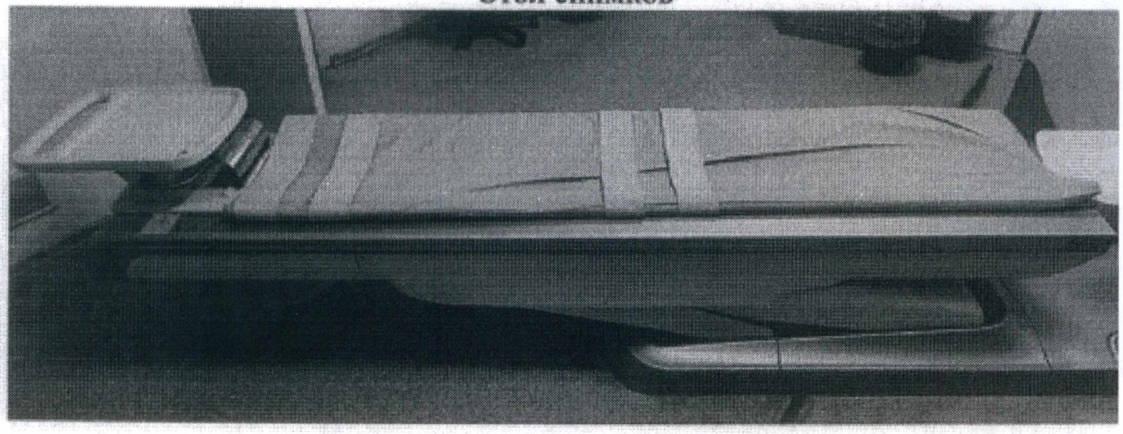


Маркировка стола снимков

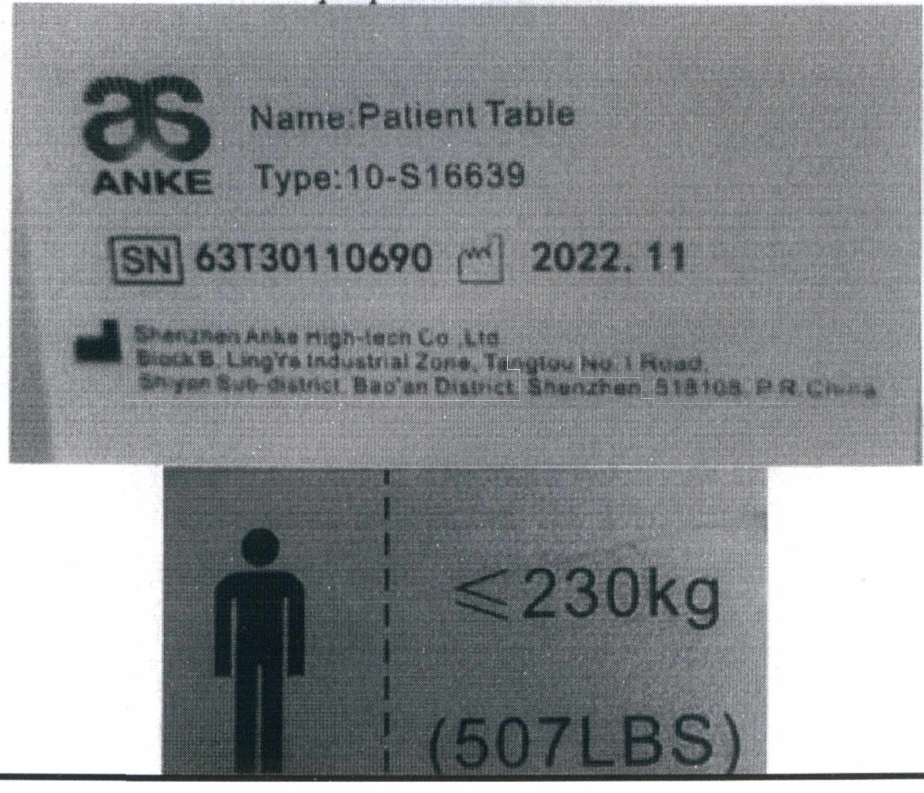


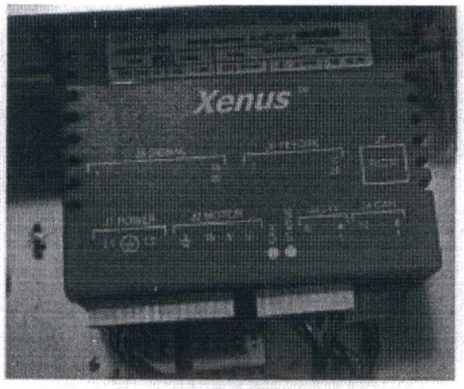

Маркировка блока управления вертикального движения стола

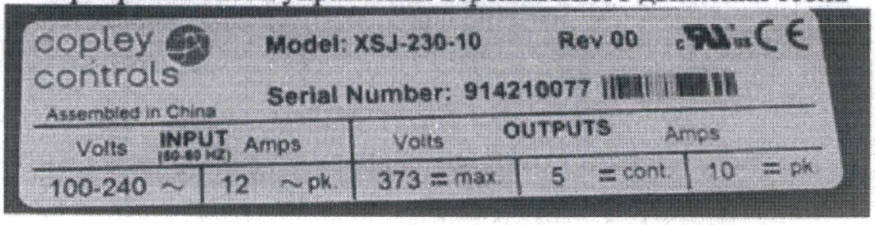


Блок педальный

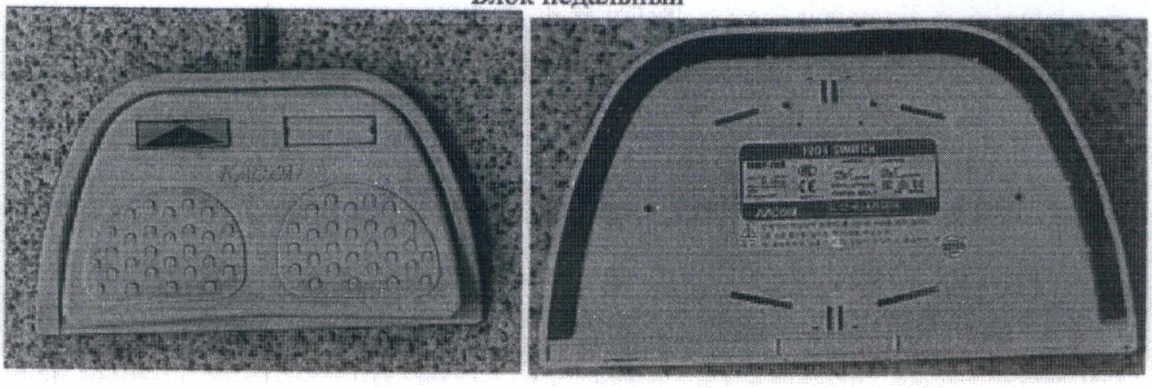


Маркировка блока педального



Подставка

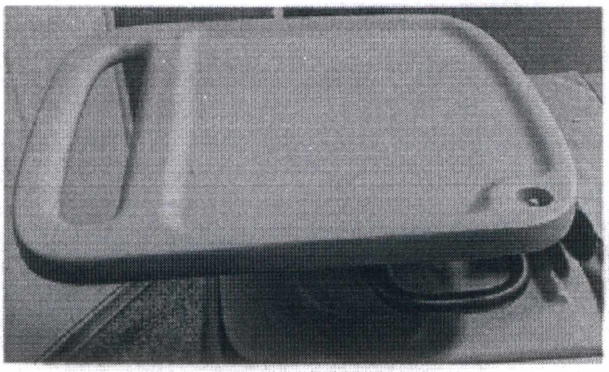


Питающее устройство

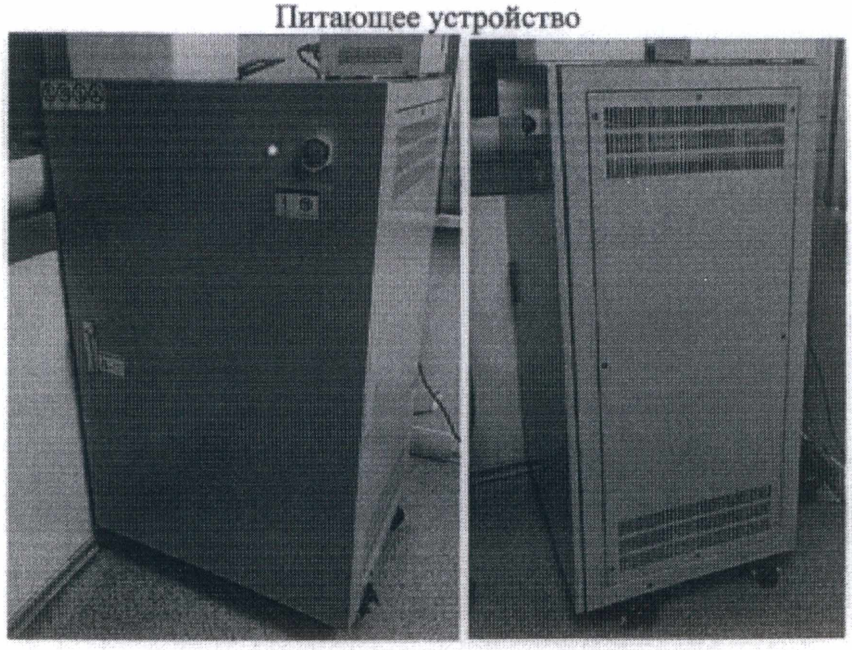


Маркировка питающего устройства




Предустановленное программное обеспечение:
Anke Anatom ClearVIEW, Issued Version: V1.0, Full Version: V1.0.230320

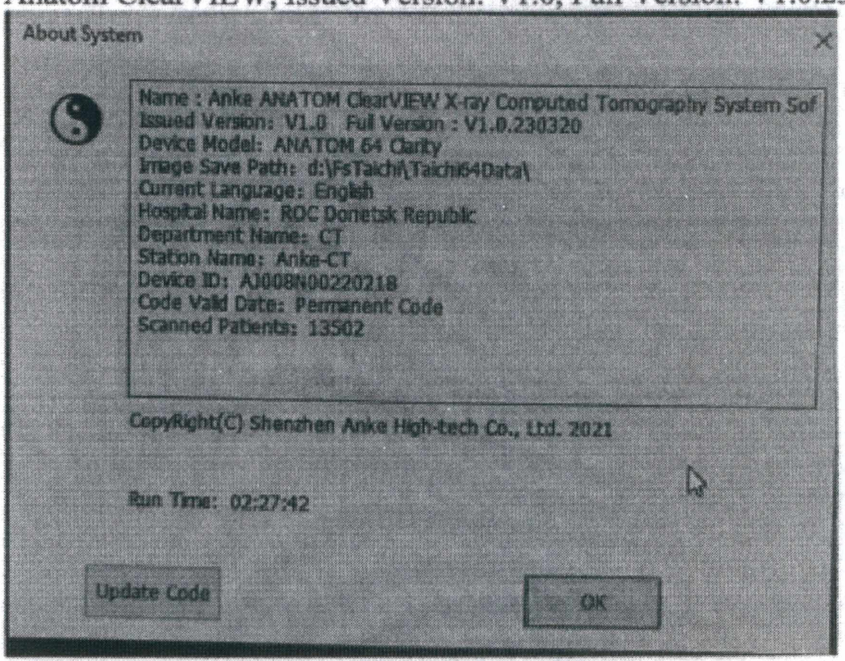

Программное обеспечение ReconEngine (Версия: 1.0.82241021)

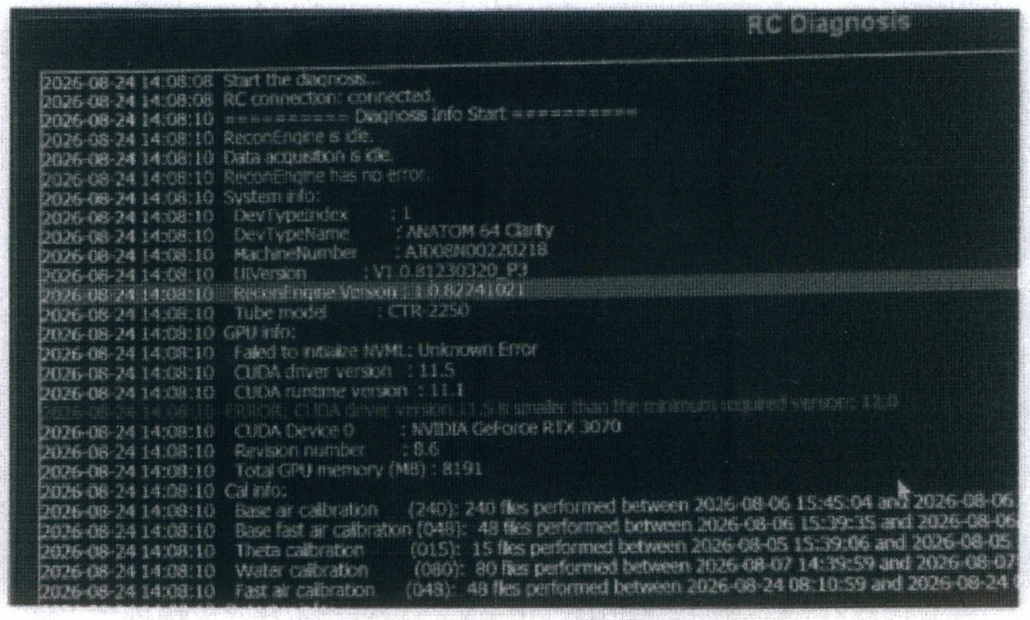

Программное обеспечение MySQL (Версия 5.6)

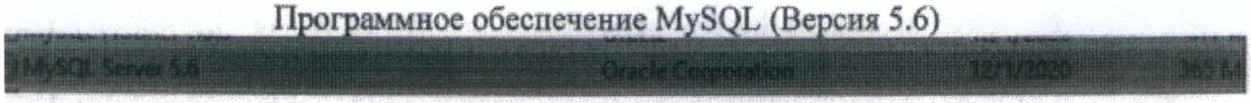

LCD монитор